



RAKUDES®

ポジショニングクッション

やすらぎと、楽しさと、健康のために 社会貢献を目指しています。

ラクデスとは、創業昭和32年

株式会社丸井商事 製造元メーカーの自社ブランドです。

現在も、OEM(相手先ブランド製造)として、

量販様、百貨店様、卸会社様→小売店様へ

納品させて頂いておりますが、

この度、自社商品の展開を始めました。

素材、加工技術、睡眠環境、人間工学などの

知見ノウハウを活かして商品作りいたします。



ロゴは、地球の中に『人』と『品』を表し、

人は、無重力状態のニュートラルな姿勢をイメージしています。

健康、良い睡眠が取れることで、周囲にも幸せが広がる。




臥位

ベッド

介護現場にも分かりやすい、やさしいポジショニング

- 身体をクッションで支えることで、拘縮・変形のある方でも安楽に休んでいただけます。
- 四肢・体幹・頸部のアライメントを整え、安心・安楽な体位づくりを支援します。
- 褥瘡予防・拘縮／変形予防・筋緊張の緩和・呼吸の改善・活動の向上など

使用例

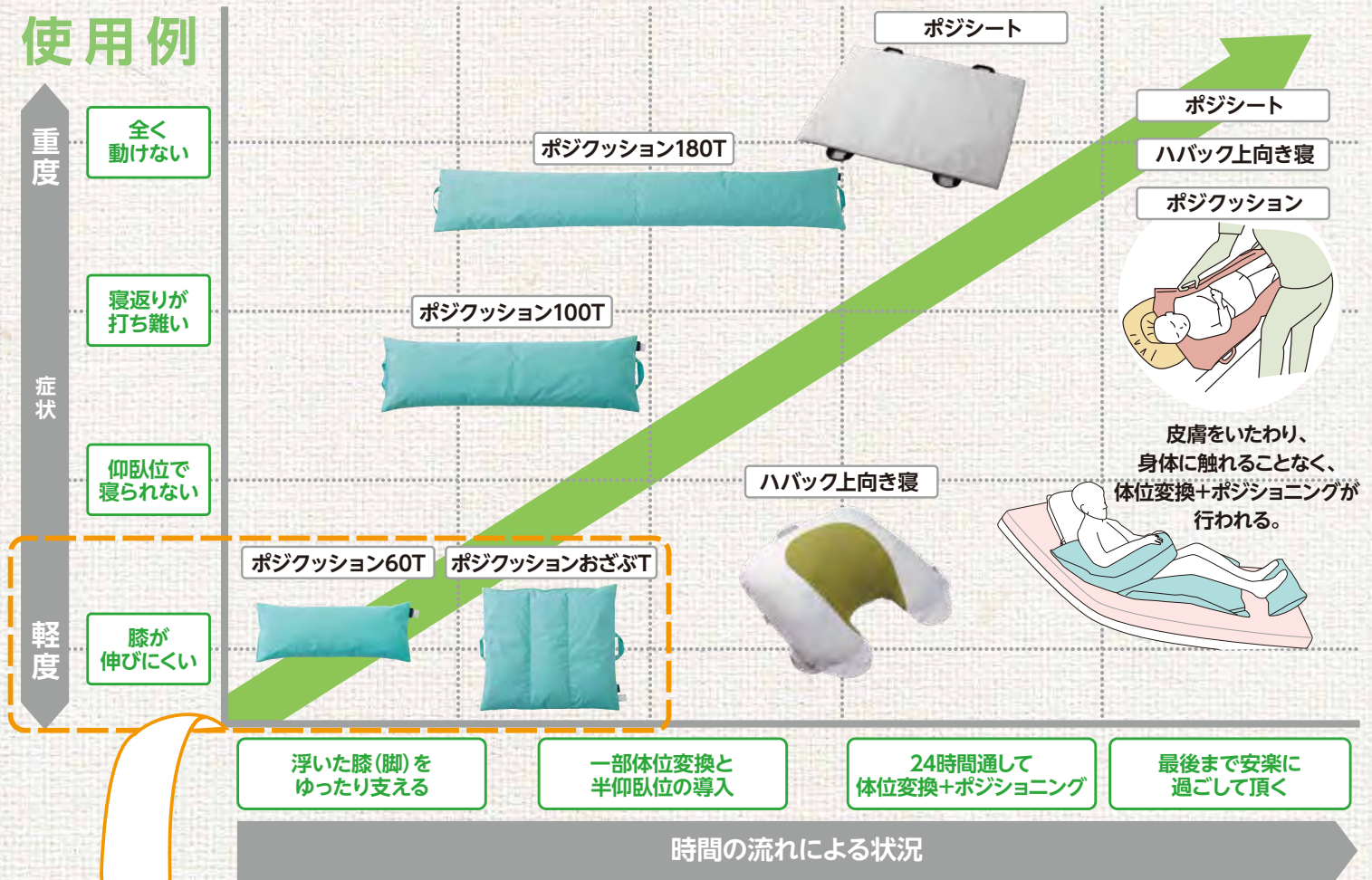

やすらぎと、楽しさと、健康のために、社会貢献をめざしています。

ポジショニング実施前

ポジショニング実施直後

膝が痛い場合

軽度からのご使用がオススメです

膝が曲がった状態で固まる(拘縮)と、次第に骨盤や背骨まで傾き、ねじれてしまうことがあります。

ポジクッション60T

ポジクッションおざぶT

ポジクッション

Poji Cushion

基本設計

日本人の体格に合わせたサイズ

- 中素材は、動いて押せば安定
- 姿勢を整えることで、体圧が分散
- 表面生地は、ポジショニングに適した摩擦力

小柄な方向け
表生地は綿100%



洗濯 40℃
乾燥 80℃

現代の日本人の体格をカバー

耐熱タイプ




洗濯 95℃

乾燥 100℃


オートクレープ105℃まで対応

100T、180T、おざぶT、80角Tは、[介護保険：福祉用具貸与\(体位変換器\)](#)

〔仰臥位〕

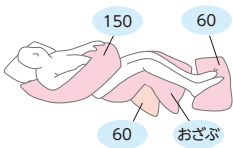

〔半仰臥位〕

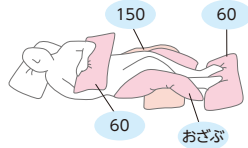


モデル身長 150cm

〔ギヤッジアップ姿勢〕



〔半側臥位〕

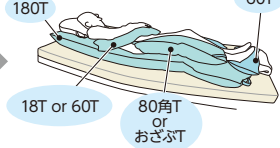

モデル身長 170cm


中素材の特長



流動性と安定感を確保!

流動性がありながら、押せば安定する。特殊開発素材「ナジーム®」+ビーズ
細かくウレタンを特殊加工した【ナジーム】とビーズを混ぜ合わせることで、振れば自由に動き、押せば素材同士が絡み合い形状を安定させます。
素材の変形量や弾力性を吟味して、心地よさを追求しました。


圧縮試験の結果[硬さ40%(N)]

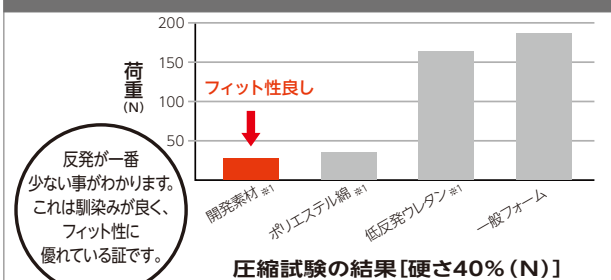

反発が一番少ない事がわかります。これは馴染みが良く、フィット性に優れている証です。

圧縮試験の結果[硬さ40%(N)]

圧縮試験の結果[最大荷重(N)]

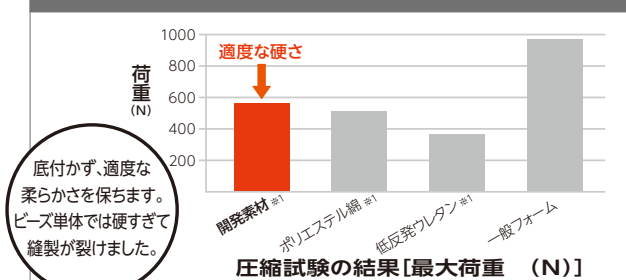

底付かず、適度な柔らかさを保ちます。ビーズ単体では硬すぎて縫製が裂けました。

圧縮試験の結果[最大荷重(N)]

※1 グラフは、静岡県工業技術研究所 平成25年度工技企第1-47号の数値により作成 一般フォームは自社測定
※2 ポジクッション・ピンク色タイプのデータ値です。グリーン色は、ピンク色のデータ触感に合わせて配合しています。

監修：社会福祉法人五十鈴荘

技術協力：静岡県工業技術研究所、ファルマバレーセンター

静岡市「新商品等開発事業」採択・静岡県中小企業研究開発助成事業・静岡県経営確認認定事業
テクノイト登録商品 (TAISコード 01249-000004~000007、01249-000013~000018)




円背の方でも仰臥位を取るために

11

ハバック 上向き寝

Hump Back Face Up Pillows

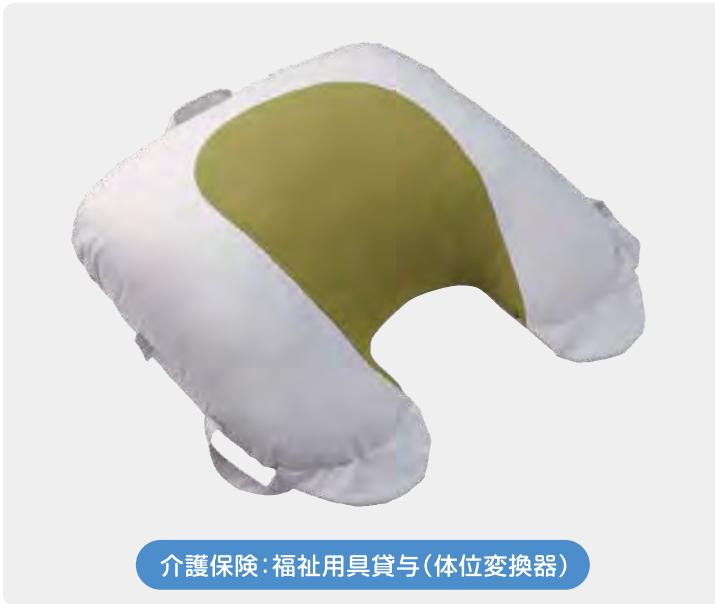


介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)

基本設計

円背の方でも、頭部から肩甲骨まで支えることで、仰臥位が取りやすい体位変換器です。特に、肩甲骨のすき間を支えます。

- 肩と首の隙間にフィット、寝返りの邪魔にはなりません
- 3箇所の取っ手で、やさしく体位変換
- 頭部の置き位置が、わかるように2色のカバーデザイン
意匠登録 第1487309号
- 裏側のファスナーを開けて、高さの調節
- 外力バー、中本体、小クッション共に丸洗いできます
※低温乾燥

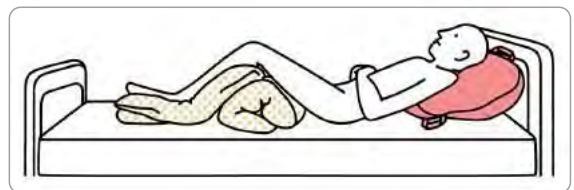

特別養護老人ホーム竜爪園、静岡県工業技術研究所と共同開発 静岡県と共同で特許取得(特許第5604877号)
静岡市『新商品等開発事業』採択商品・テクノエイド登録商品(TAISコード 01249-000011)

身体に触れずに体位変換

12

ポジシート

Poji Sheets



介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)

基本設計

「深夜睡眠中の体位変換」や「過度の筋緊張」など、身体に触れられる苦痛を少なくするために開発されました。

- 介助スタッフさんが初心者の方でも扱いやすい
- 体重の重い利用者様へのご使用もOK。
ただし、移動用リフトのつり具としては、利用できません。
- 体圧分散性が高く、褥瘡のリスクを軽減
- 少しの汚れでも分かり易い様に、色はアイボリー
- 外力バー、中本体共に丸洗いできます
※低温乾燥




監修：特別養護老人ホーム五十鈴荘 技術協力：静岡県工業技術研究所
静岡市『新商品等開発事業』採択商品・テクノエイド登録商品(TAISコード 01249-000012)

背中の際間を埋めて、安楽な座位づくり

13

ジャバラ背あて車椅子用クッション【業務用】

Jabara Cushion

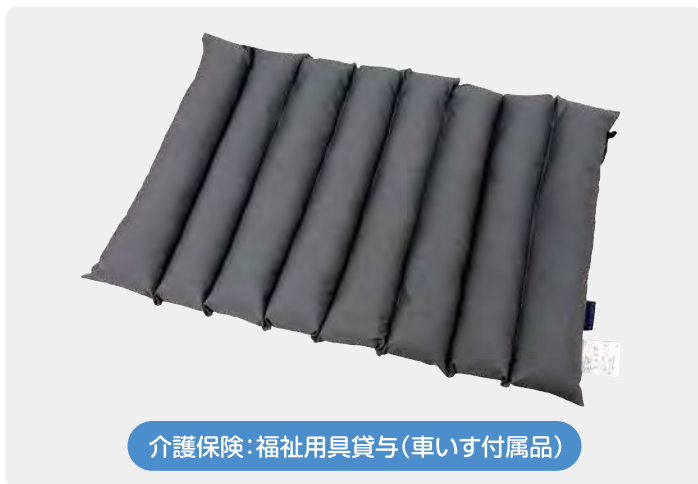


介護保険：福祉用具貸与(車いす付属品)

基本設計

車椅子から採寸、人間工学に基づいた形状・仕様。個々の体型にフィットし易い。

- 円背、側弯症の症状に合わせて、背中を安定
- 形状の安定性と清潔な状態に考慮しポリエステル綿を使用
- 丸洗いです。※低温乾燥

すき間を埋めて、体位変換

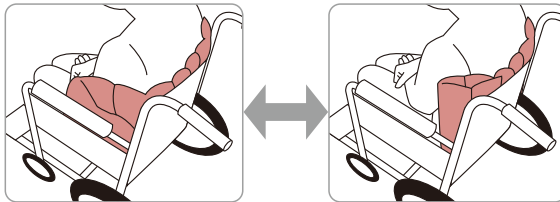

開発協力：特別養護老人ホーム竜爪園 技術協力：静岡県工業技術研究所
静岡市「新商品等開発事業」採択商品・テクノエイド登録商品(TAISコード 01249-000019)



円背の方が、安楽な座位姿勢を保つために

14

ハバック 腕置きクッション

Hump Back Arm Cushion



介護保険：福祉用具貸与(車いす付属品)

基本設計

車椅子のサイズから人間工学に基づいた形状。肘から手の平までのせ、腕の重さを支えます。

- クッション転落を防止するため、片方にベルト装着
- 外カバーには特殊生地を組合せ体感にフィット
- 形状の安定性と清潔な状態に考慮しポリエステル綿を使用
- 外カバー、中本体共に丸洗いです。

前かがみをサポート

左右の傾きをサポート



特別養護老人ホーム竜爪園、静岡県工業技術研究所と共同開発 静岡県と共同で特許取得(特許第5604877号)
静岡市「新商品等開発事業」採択商品・テクノエイド登録商品(TAISコード 01249-000009)



ポジクッション

軽くてあつかい安い、丸洗いできることで衛生的に管理できる。
様々な場面、姿勢で豊富に使用できる。
サイズが豊富で、個々に使用することができる。
(ホスピタルS様)

丸井商事は
お客様の声を元に
開発しています。

ポジクッション

授業の中で他の製品と共に使用しています。
厚みなどを変えやすく
大きさも現実的にあっているため使いやすい。
(N大学様)

ポジクッション

四角の(おざぶ)は背もたれに使っていますが
利用者様が自宅分も購入されたくらい気に入られました。
(デイサービスK様)

ハバック 上向き寝

中の材料が動くでしょ、
肩から頭が安定していいよ。
肩が広がる様に使っているよ。
(T様)

ハバック 上向き寝

円背の人に使いよかった。
緊張が下がり後方に突っ張る感じが和らいだ。
脇の輪っかが良い。
左右に動けるのが良い。軽くて良い。
(Cリハビリテーション様)

ジャバラ背あて用クッション

姿勢の調整で安定し良かった。
(Cリハビリテーション様)

ハバック 腕置きクッション

両腕にマヒがあるが、
クッションの上に腕を置いても腕がずり落ちない。
大きさもちょうど良く、姿勢良く座位を保つことができる。
(T様)

ハバック 腕置きクッション

車イスに乗っている時、おしりが前に滑らない。
前のめりにならない。(R様)

〈製造販売元〉株式会社 丸井商事

〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町4-18

TEL:054-366-1612 <http://www.rakudes.com/>

ラクデス クッション

検索



日本製